



AURA BULK FILL

MATERIAL RESTAURADOR ULTRA UNIVERSAL



RELLENAR,
MODELAR
Y LISTO




LA SIMPLICIDAD DE RELLENO

RESTAURACIONES POSTERIORES CON COMPOSITE RÁPIDAS Y SENCILLAS.

- Acabado de aspecto natural con un único tono universal
- Gran profundidad de curado sin necesidad de una capa de nivelación
- Colocación fácil en tan solo unos segundos
- Su consistencia cerosa es firme y no se pega para optimizar la manipulación

RELLENAR, MODELAR Y LISTO

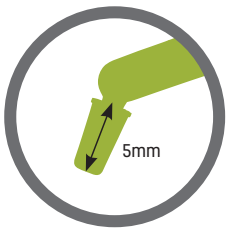

+




una máxima
escala de relleno
hasta 5 mm

20sec

FOTOCURADO CON
LED DURANTE

5mm
BULK FILL

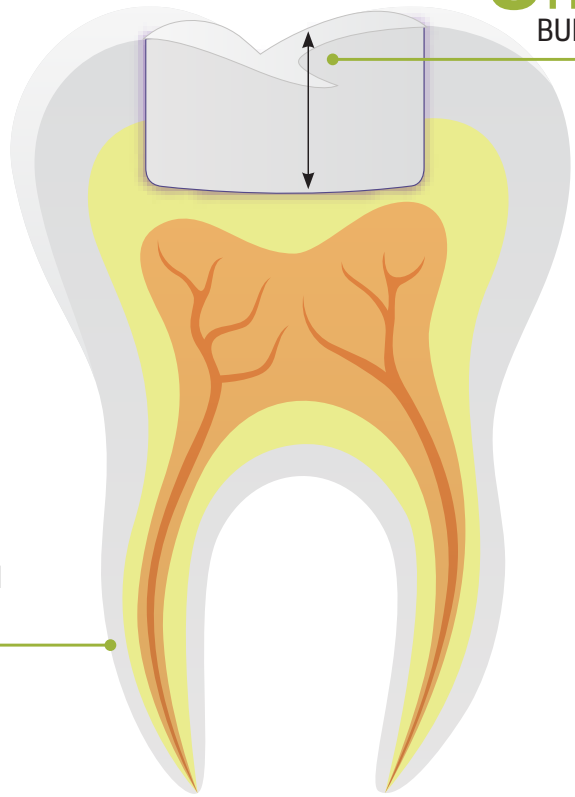

ESTÉTICA LOGRADA CASOS DE ESTUDIOS

DR BOB LOWE [USA]



BEFORE



AFTER

DR. GREGOR THOMAS [GERMANY]



BEFORE



AFTER

UN TONO. UN RELLENO.

CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA BAJA*

Aura Bulk Fill ofrece menor estrés para proporcionar restauraciones de larga duración..

EXCELENTE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*

Aura Bulk Fill resiste las grandes deformaciones sin fracturarse.

ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN*

Aura Bulk Fill resiste a las altas fuerzas compresivas de la boca.

2.21%

115MPa

375MPa

*SDI internal data

INDICACIONES

Restauraciones posteriores

Reconstrucciones

Reestructuraciones

Técnica sandwich con ionómero de vidrio




PROFUNDIDAD DE CURADO

La opacidad de aura bulk fill es función de la diferencia del índice de refracción de sus dos componentes, el relleno y la resina.


El proceso de curado altera el índice de refracción de la resina marginalmente, para hacerlo coincidir con el índice de refracción del relleno.

Esto disminuye la opacidad temporalmente, permitiendo una penetración de la luz más profunda para un curado de gran profundidad.

Tras el curado, los índices varían de nuevo para lograr la opacidad ideal para el brillante acabado camaleónico de aura bulk fill.

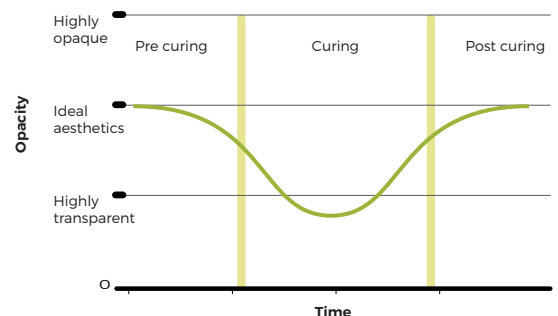


REFERENCIAS DE PEDIDOS

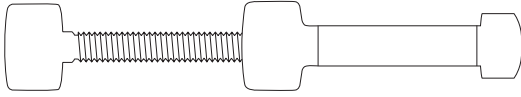

SYRINGES

Repuestos de Jeringa - 4g

8560012

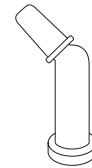

COMPLETS

Repuestos Complet - 20x 0.25g = 5g total

8565012

» Utilizo aura bulk fill desde hace tres años. La resina sale suavemente sin retrocesos y realiza un curado muy fuerte. El pulido es asombroso y mis composites posteriores no han sido nunca mejores. Las características son ideales para cualquier restauración, de dientes primarios o permanentes. He recomendado este producto a muchos colaboradores y pienso seguir usando aura bulk fill como mi única fuente de composite. «

DR LIEL GRINBAUM DMD

AURA GAMA DE PRODUCTOS

Aura
Aura Easy
Aura Bulk Fill



YOUR SMILE.
OUR VISION.



04-2024

M100272 C



+D036M1002721-

HECHO EN AUSTRALIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASIL 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
ALEMANIA 0800 100 5759
ITALIA 00800 0225 5734

NUEVA ZELANDA 0800 808 855
ESPAÑA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
USA & CANADÁ 1 800 228 5166